

Erste Schritte

In diesem Spickzettel erfahren Sie, wo Sie die Software herunterladen können, wie Sie Ihre Lizenz(en) aktivieren können und wo Sie mehr über den Umgang mit Grid 3 erfahren.

Download der Software

Auf der Internetseite des Herstellers Smartbox finden Sie in der Rubrik Grid 3 den Downloadlink zur Software:

<https://thinksmartbox.com/product/grid-3>

Klicken Sie hier auf Download Trial bzw. Download Grid 3. Sie werden zu einer Registrierungsseite weitergeleitet, auf der Sie die Felder mit * ausfüllen müssen.

Anschließend

klicken Sie auf Download Grid 3.

Smartbox

ProductsHow to tryAboutTraining and SupportContact us

Download Grid with a free trial

To download Grid 3, please fill in the short form below.

First name *

Last name *

Do you require a quote to purchase a Grid 3 licence?

Select 'No' if you would like to proceed with a free 60-day trial without purchasing a Grid licence at this time.

- ☐ Yes
☐ No
☐ I am interested in an Evaluator / Assessment licence

Email address *

Phone number *

Location *

UK

Address *

Street Address

Address Line 2

City

State / Province / Region

ZIP / Postal Code

Country

Your role *

- ☐ SLT/SLP
☐ Teacher or Educational professional
☐ Occupational therapist
☐ User/potential user
☐ Family member/Carer
☐ Other

Other

Smartbox may use your information to send you regular updates and marketing emails. You can change your mind at any time by contacting hello@thinksmartbox.com.

☐ I agree for Smartbox to send me regular emails with the latest news.

Anschließend werden Sie nochmals gefragt, welches Produkt Sie herunterladen möchten.
Klicken
Sie wiederum auf Grid 3.



Which product would you like to download?

Grid 3



Die Installationsdatei ist jetzt auf Ihrem Computer verfügbar. Sie können das Programm nun installieren.


I:Grid 3 – Erste Schritte

Version: 25.08.2022 Seite 2 von 2

Installation der Software

Ab jetzt geht es auf Deutsch weiter, sofern Ihr Windows auf Deutsch eingestellt ist. Sie werden nun

durch den Installationsprozess geleitet. Wählen Sie die für Sie passenden Optionen aus und bestätigen Sie jeweils mit Weiter. Nachdem Sie die Datenschutzrichtlinie und die Endbenutzervereinbarung akzeptiert haben, startet die Installation von Grid 3. Wenn die Installation beendet ist, schließen Sie das Fenster mit Fertig. Sie können die Software nun starten.

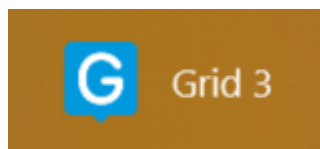

Aktivieren von Lizenzen

Grid 3 läuft ohne Aktivierung 60 Tage im Demomodus. Währenddessen können Sie die Software uneingeschränkt nutzen. Nach Ablauf dieses Testzeitraums können Sie weiterhin Remote-Bearbeitungen vornehmen, sofern Sie Seitensets eines/einer Angehörigen / KlientIn so bearbeiten und dazu die Berechtigung per E-Mail erhalten haben.

Sofern Sie eine Lizenz für Grid 3 und z.B. für die Nutzung der Symbolsammlung METACOM erhalten haben, können Sie diese aktivieren, so dass Sie Grid 3 zeitlich unbegrenzt vollumfänglich nutzen können.

Öffnen Sie die Einstellungen über F10 bzw. über die Menüleiste – Einstellungen. Sollte die Menüleiste ausgeblendet sein, drücken Sie F12 zum Einblenden. Wählen Sie Lizenzen.

Hier haben Sie eine Übersicht, welche Software, Symbol-Bibliotheken, Stimmen und Seitensets lizenziert sind und welche nicht. Um eine Lizenz hinzuzufügen, wählen Sie Aktivieren, geben Ihre Lizenz ein und bestätigen mit Aktivieren. Möchten Sie eine weitere Lizenz hinzufügen, wiederholen Sie diesen Schritt.