

Erste Schritte

In diesem Spickzettel erfahren Sie, wo Sie die Software herunterladen können, wie Sie Ihre Lizenz(en) aktivieren können und wo Sie mehr über den Umgang mit Grid 3 erfahren.

Download der Software

Auf der Internetseite des Herstellers Smartbox finden Sie in der Rubrik Grid 3 den Downloadlink zur Software:

<https://thinksmartbox.com/product/grid-3>

Klicken Sie hier auf Download Trial bzw. Download Grid 3. Sie werden zu einer Registrierungsseite weitergeleitet, auf der Sie die Felder mit * ausfüllen müssen.

Anschließend

klicken Sie auf Download Grid 3.

Download Grid 3

To download Grid 3, please fill in the short form below.
You have access to a 60 day free trial. During this period you will have full access to the software.

Fields marked with an * are required

First name *

Last name
Email *
Country
Role

☐ User
☐ Carer
☐ Family member
☐ Occupational therapist
☒ Speech and language therapist
☐ Speech and language therapist assistant
☐ Teacher
☐ Other

If you want to stay up to speed with the latest news and updates, Smartbox will use the information you provide on this form to be in touch with you to provide updates and marketing.

☐ **I agree for Smartbox to send me occasional emails about updates and new products**

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at hello@thinksmartbox.com. We will treat your information with respect.
For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their [Privacy Policy](#) and [Terms](#).

[Download Grid 3](#)

Anschließend werden Sie nochmals gefragt, welches Produkt Sie herunterladen möchten.
Klicken
Sie wiederum auf Grid 3.



Which product would you like to download?

[Grid 3](#) >

Die Installationsdatei ist jetzt auf Ihrem Computer verfügbar. Sie können das Programm nun installieren.


I:Grid 3 – Erste Schritte

Version: 25.08.2022 Seite 2 von 2

Installation der Software

Ab jetzt geht es auf Deutsch weiter, sofern Ihr Windows auf Deutsch eingestellt ist. Sie werden nun

durch den Installationsprozess geleitet. Wählen Sie die für Sie passenden Optionen aus und bestätigen Sie jeweils mit Weiter. Nachdem Sie die Datenschutzrichtlinie und die Endbenutzervereinbarung akzeptiert haben, startet die Installation von Grid 3. Wenn die Installation beendet ist, schließen Sie das Fenster mit Fertig. Sie können die Software nun starten.

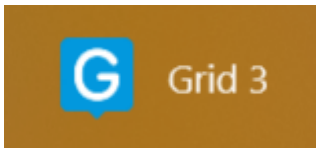

Aktivieren von Lizenzen

Grid 3 läuft ohne Aktivierung 60 Tage im Demomodus. Währenddessen können Sie die Software

uneingeschränkt nutzen. Nach Ablauf dieses Testzeitraums können Sie weiterhin Remote-Bearbeitungen vornehmen, sofern Sie Seitensets eines/einer Angehörigen / KlientIn so bearbeiten

und dazu die Berechtigung per E-Mail erhalten haben.

Sofern Sie eine Lizenz für Grid 3 und z.B. für die Nutzung der Symbolsammlung METACOM erhalten

haben, können Sie diese aktivieren, so dass Sie Grid 3 zeitlich unbegrenzt vollumfänglich nutzen

können.

Öffnen Sie die Einstellungen über F10 bzw. über die Menüzeile – Einstellungen. Sollte die

Menüzeile ausgeblendet sein, drücken Sie F12 zum Einblenden. Wählen Sie Lizenzen.

Hier haben Sie eine Übersicht, welche Software, Symbol-Bibliotheken, Stimmen und Seitensets

lizenziert sind und welche nicht. Um eine Lizenz hinzuzufügen, wählen Sie Aktivieren, geben Ihre

Lizenz ein und bestätigen mit Aktivieren. Möchten Sie eine weitere Lizenz hinzufügen, wiederholen Sie diesen Schritt.