


Ihr Grid Pad aufstellen


Ihr Grid Pad kann an verschiedenen Positionen und Orten eingesetzt werden.

Auf einem Schreibtisch

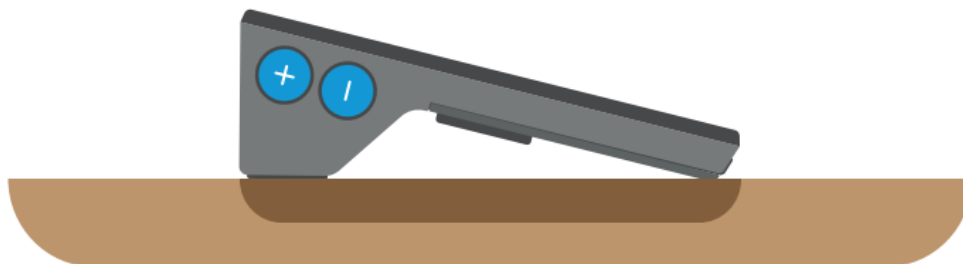


Platzieren Sie Ihr Grid Pad auf einer ebenen Fläche. Die Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Geräts.

Verwenden des Standfußes

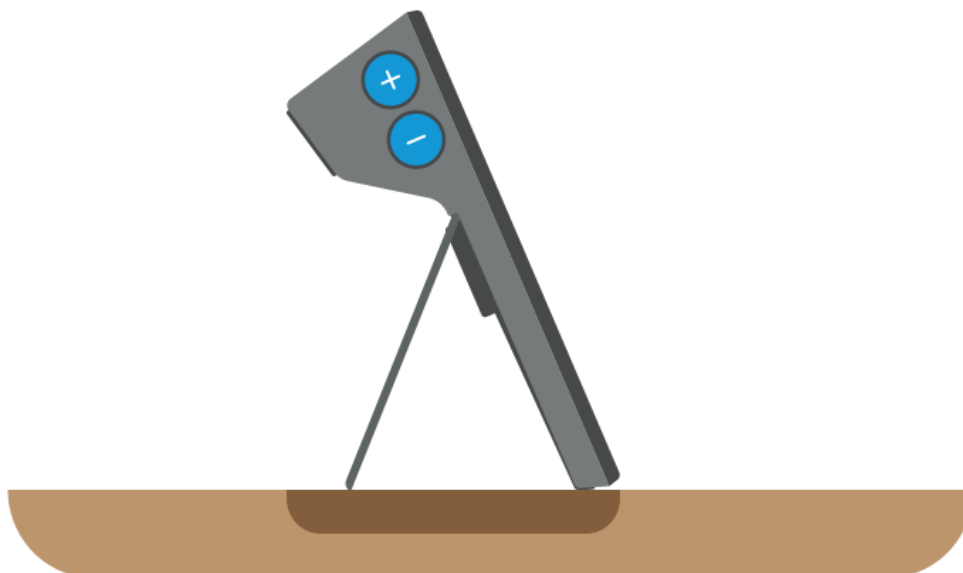


Der Ständer lässt sich herausklappen, damit Sie das Grid Pad in eine bequeme Position bringen können.

Sie können den Ständer bis zu einem Maximum von 100 Grad ausklappen.

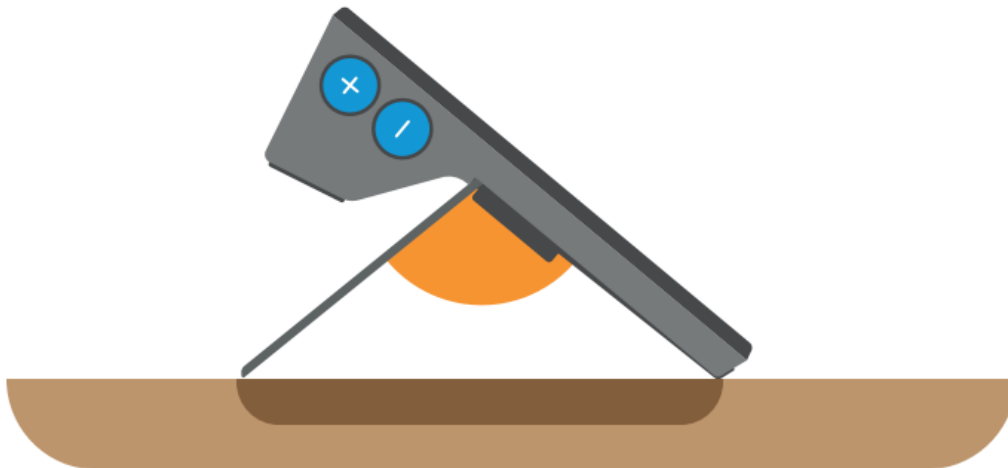

Der Ständer verfügt außerdem über Gummifüße, um ein Verrutschen zu verhindern.

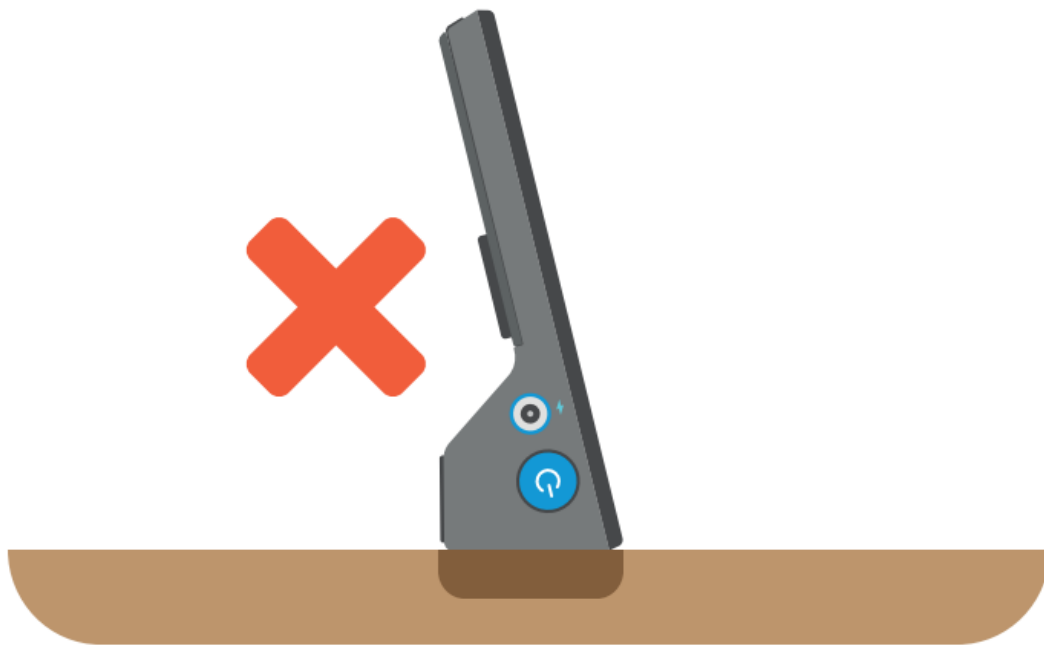

Stellen Sie das Gerät nicht so ab, dass die Lautsprecher und der zweite Bildschirm nach unten zeigen. Dies kann das Gerät beschädigen.