

Wie benutze ich meine ElevenLabs-Stimme in Grid?


Nachdem Sie Ihr ElevenLabs-Konto eingerichtet und Ihre Stimme erstellt haben, können Sie die Stimme in Grid einbinden. Weitere Informationen zum Erstellen einer Stimme finden Sie hier: [Tipps und Hinweise zur Aufnahme Ihrer ElevenLabs-Stimme – REHAVISTA Hub](#)


Um die Stimme in Grid einzubinden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie mindestens die Version 97 von Grid 3 und Grid for iPad verwenden und Ihren API-Schlüssel von der ElevenLabs-Website abrufen.


1. Öffnen Sie die ElevenLabs-Website <https://elevenlabs.io/app/home> und melden Sie sich mit Ihrem Account an.

II ElevenLabs

Log in to your account

 Sign in with Google

 Sign in with Facebook

 Sign in with GitHub

Sign in with SSO

Or continue with email

Email

Enter your email address

Password Forgot password

.....

Sign in

Don't have an account? [Sign up](#)

2. Wählen Sie unten links „Developers“

The screenshot displays the ElevenLabs Creative Platform interface. On the left, a sidebar lists various tools and products. The 'Developers' option at the bottom of the sidebar is highlighted with a red arrow. The main content area shows the 'Developers' section, which includes tabs for 'Overview', 'API Keys', and 'Web'. Below the tabs, there is a 'Developer quicks' section with a 'Get started' button and a 'Quick Links' section with buttons for 'Create an API Key' and 'Libraries & SDKs'.

3. Wählen Sie die Option „Create an API-Key“ / „API-Schlüssel erstellen“.

The screenshot shows the 'Developers' section of the ElevenLabs website. At the top, there are navigation links for 'Overview', 'API Keys', 'Webhooks', and 'Usage', along with buttons for 'API Pricing' and 'Documentation'. Below this is a 'Developer quickstart' section with a 'Get started' button and a code snippet in JavaScript. The code snippet is as follows:

```
1 import { ElevenLabsClient, play } from '@elevenlabs/elevenlabs-js';
2
3 const elevenlabs = new ElevenLabsClient({
4   apiKey: "YOUR_API_KEY", // Defaults to process.env.ELEVENLABS_API_KEY
5 });
6
7 const audio = await elevenlabs.textToSpeech.convert(
8   'JBFqnCBsd6RMkjVDRZzb', // voice_id
9   {
10    text: 'The first move is what sets everything in motion.',
11    modelId: 'eleven_multilingual_v2',
12    outputFormat: 'mp3_44100_128', // output_format
13  }
14 );
15
16 await play(audio);
```


Below the code snippet is a 'Quick Links' section with five buttons: 'Create an API Key' (highlighted with a red box), 'Browse Models', 'API Reference', 'Libraries & SDKs', 'ElevenLabs Agents', and 'Pricing Overview'.

4. Wählen Sie nun „Create Key“ / „Schlüssel erstellen“.

The screenshot shows the 'User API Keys' section of the ElevenLabs website. At the top, there are navigation links for 'Overview', 'API Keys', 'Webhooks', and 'Usage', along with buttons for 'API Pricing' and 'Documentation'. Below this is the 'User API Keys' section with a description: 'An API key lets you connect to our API and use its features. You can create multiple keys with different access levels.' and a '+ Create Key' button.

Wichtig:

Beim Erstellen des API-Schlüssels muss sichergestellt werden, dass er nicht eingeschränkt ist (Restrict Key Option deaktivieren).

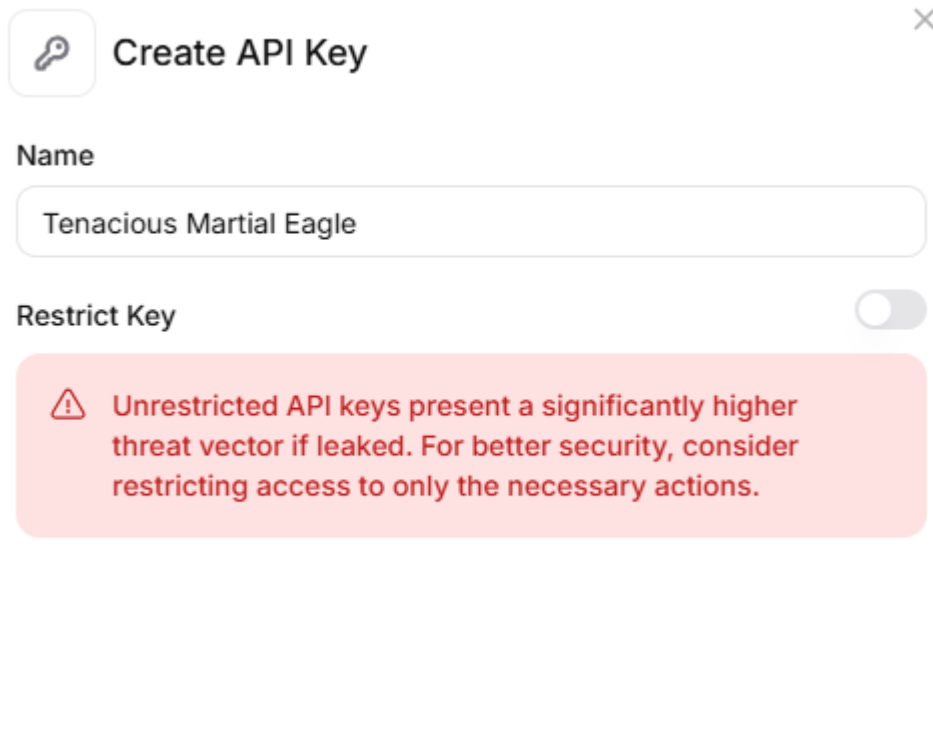

5. Sobald der API-Schlüssel erstellt wurde, wird er auf dem Bildschirm angezeigt. Sie müssen auf die drei kleinen Punkte neben dem Schlüssel klicken und „In Zwischenablage kopieren“ / „Copy Key ID“ klicken, damit er in Grid 3 eingefügt werden kann.

Developers

Overview **API Keys** Webhooks Usage

[API Pricing ↗](#)


[Documentation ↗](#)

User API Keys

An API key lets you connect to our API and use its features. You can create multiple keys with different access levels.

[+ Create Key](#)


NAME	KEY	CREATED	ENABLED	
██████████53d9	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮
██████████6576	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮

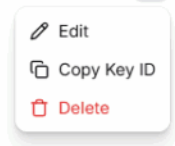


Jetzt können Sie den API-Schlüssel in Grid 3 oder Grid for iPad hinzufügen. Die Grid for iPad Anleitung folgt nachfolgend der von Grid 3 nach Punkt 11 der Anleitung.


6. Öffnen Sie Grid 3 und wählen Sie gegebenenfalls Ihren Benutzer aus.

7. Wählen Sie die Menüleiste (drei Striche, oben links) – Einstellungen – Sprachausgabe.

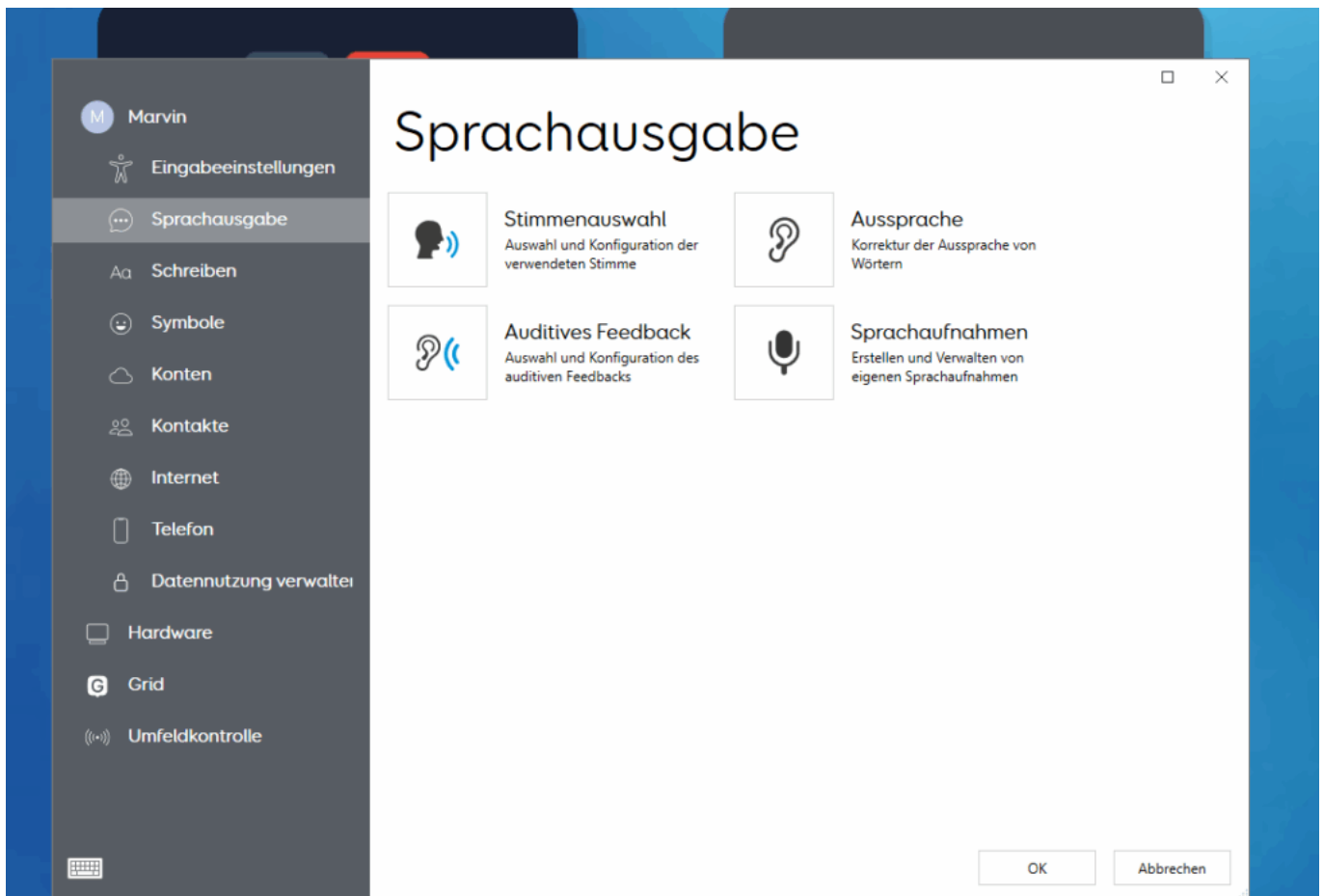

9. Unter der Option „Stimmenauswahl“ müssen Sie unter dem Punkt „ElevenLabs“ „Konfigurieren“ auswählen. Dies führt Sie zum Bildschirm, auf dem Sie Ihren API-Schlüssel einfügen können. Machen Sie einen Rechtsklick in das Eingabefeld „API Key“ und wählen sie im Menü „Einfügen“. Der API Schlüssel sollte nun in Ihrem Textfeld hinterlegt sein. Klicken Sie dann auf „Verbinden“.

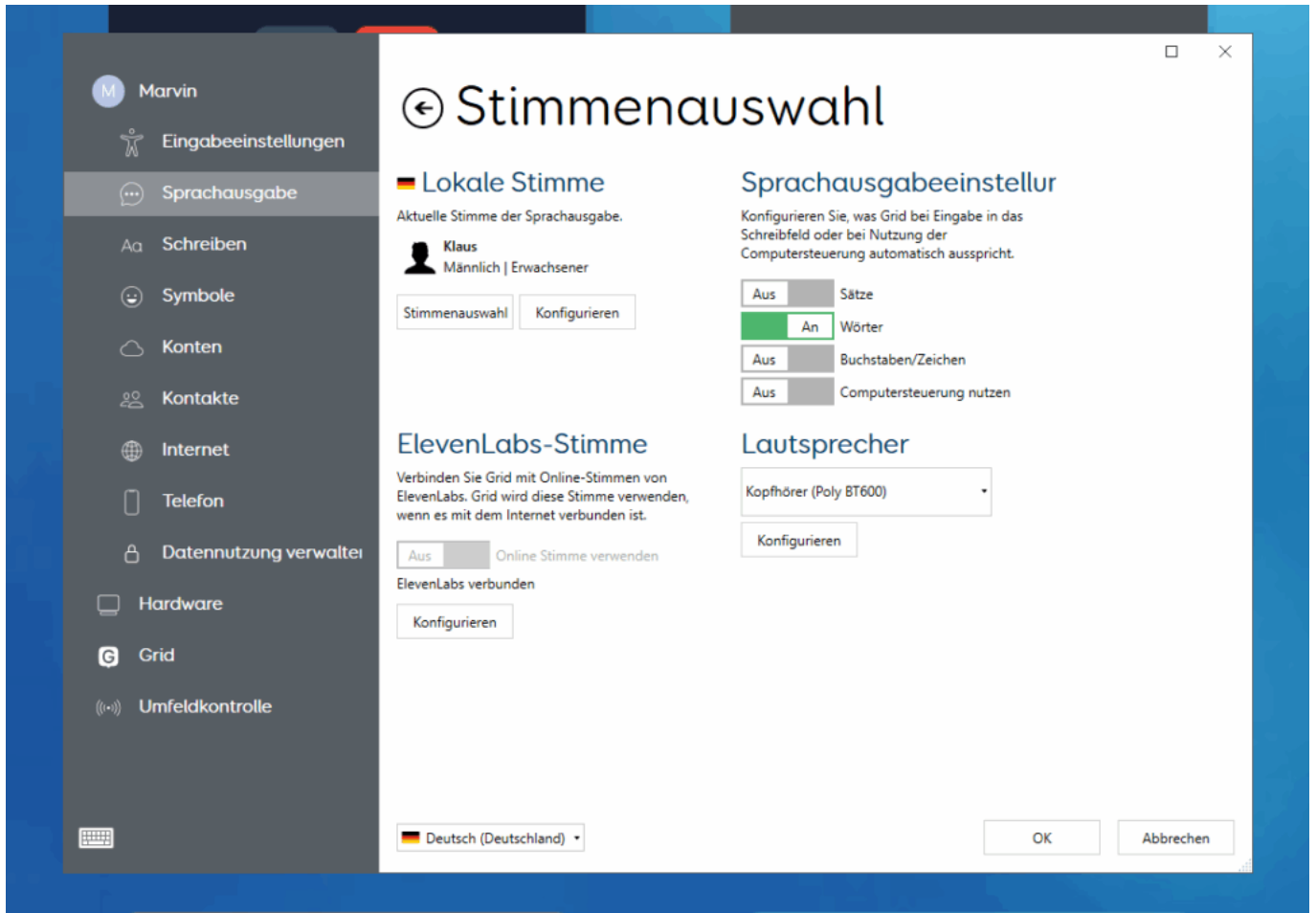

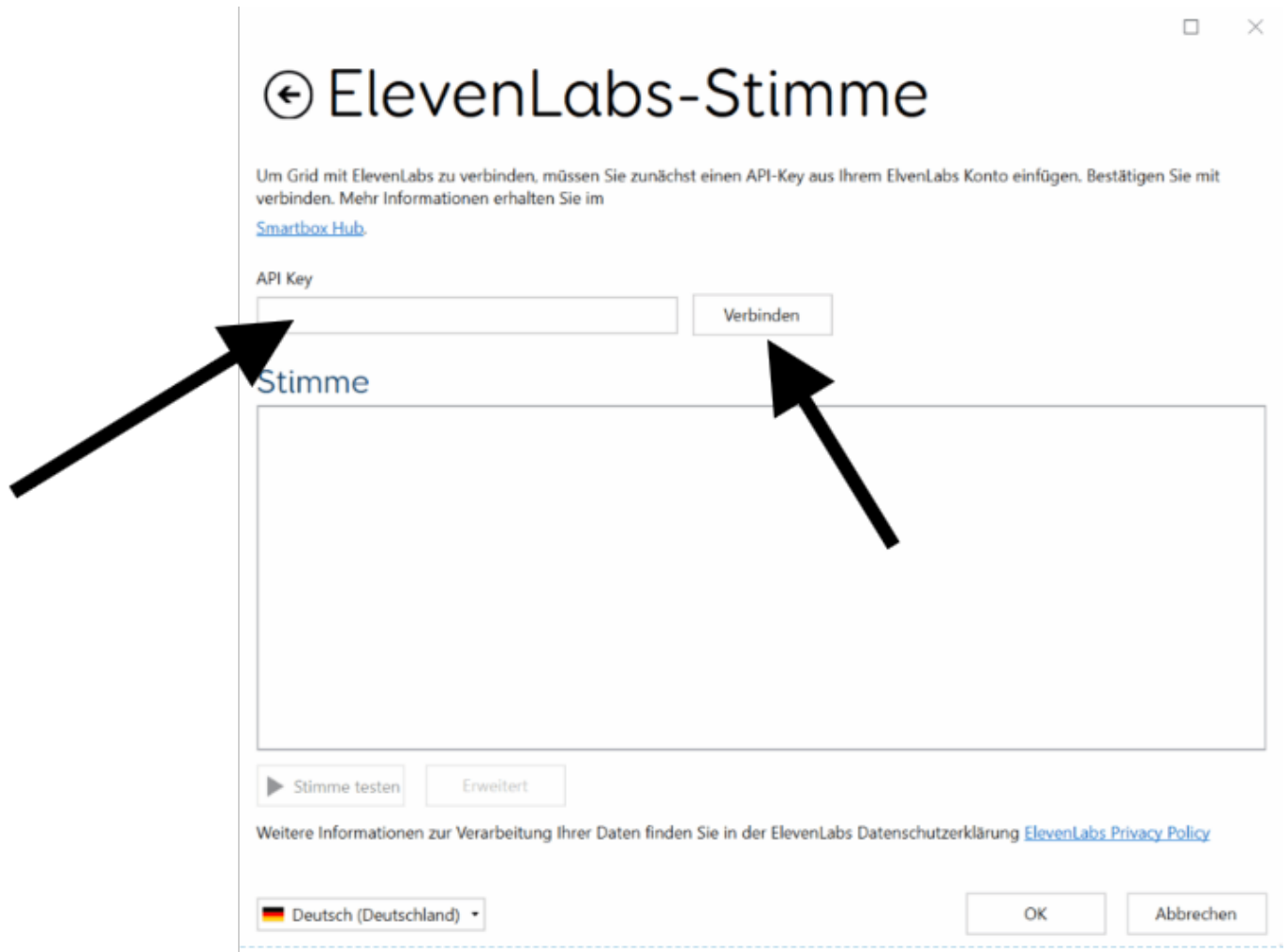

10. Sie werden unsere Datenschutz-Abfrage sehen, der Sie zustimmen müssen, um die Einrichtung der ElevenLabs-Stimme fortzusetzen.
11. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen Sie die in Ihrem Account verfügbaren Stimmen unten aufgeführt und können die Stimme auswählen, die Sie verwenden möchten.

Smartbox Tizzy

Access

Speech

Writing

Symbols

Accounts

Contacts

Web

Phone

Data control

Devices

Grid

Environment control

ElevenLabs

To connect Grid to ElevenLabs you must first provide an API key. For information on how to find this, please visit the [Smartbox Hub](#).

API key

Disconnect ✓

Voice

- Tizzy Instant voice - Cloned
- Tizzy Instant voice 2 - Cloned
- Audiobook voice - Generated
- Cheery voice design - Generated
- Voice design male - Generated
- Alice - Premade
- Aria - Premade
- Bill - Premade

Listen Advanced

Credits: 33,258 / 110,000


For information on data processed by ElevenLabs, see [ElevenLabs Privacy Policy](#)

English (United Kingdom)


OK Cancel

Grid for iPad Anleitung:

1. Gehen Sie in die Einstellungen (drei Punkte oben rechts, dann Einstellungen wählen).
2. Wählen Sie den Punkt „Sprachausgabe“ und dann „Stimmenauswahl“.

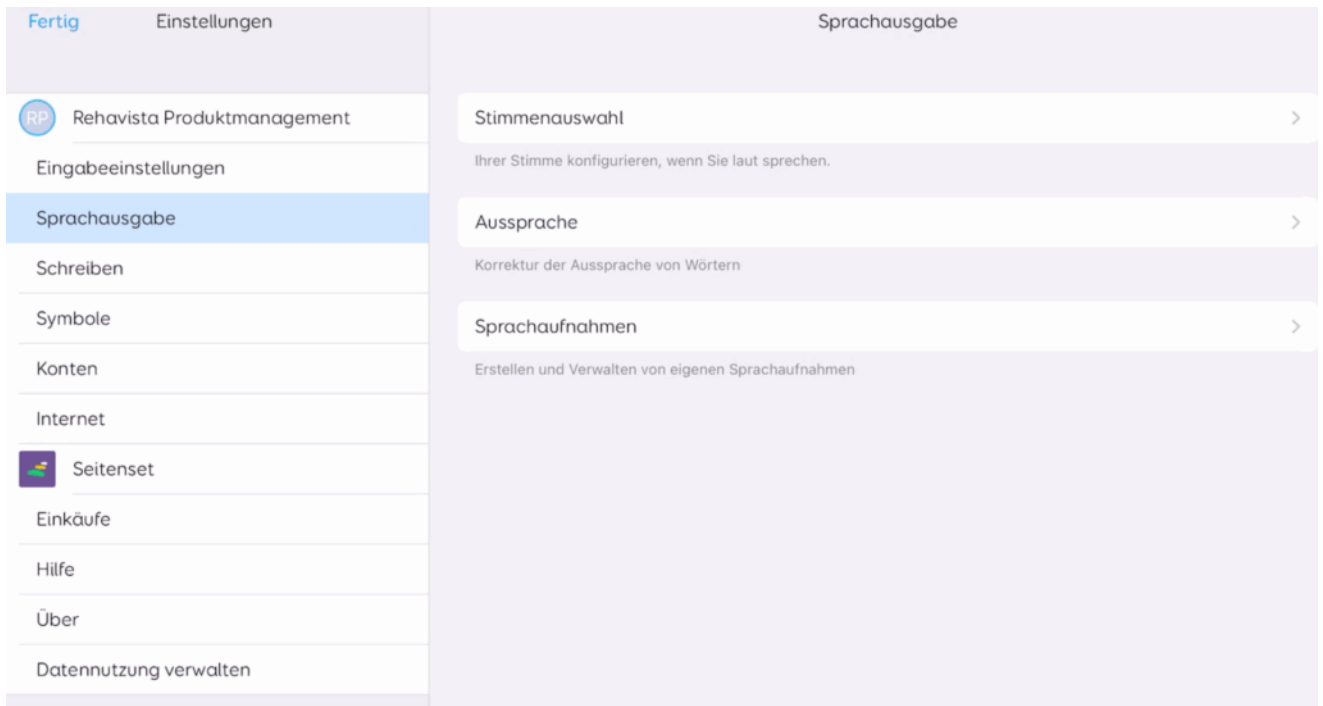

3. Wählen Sie den Punkt „Konfigurieren“.

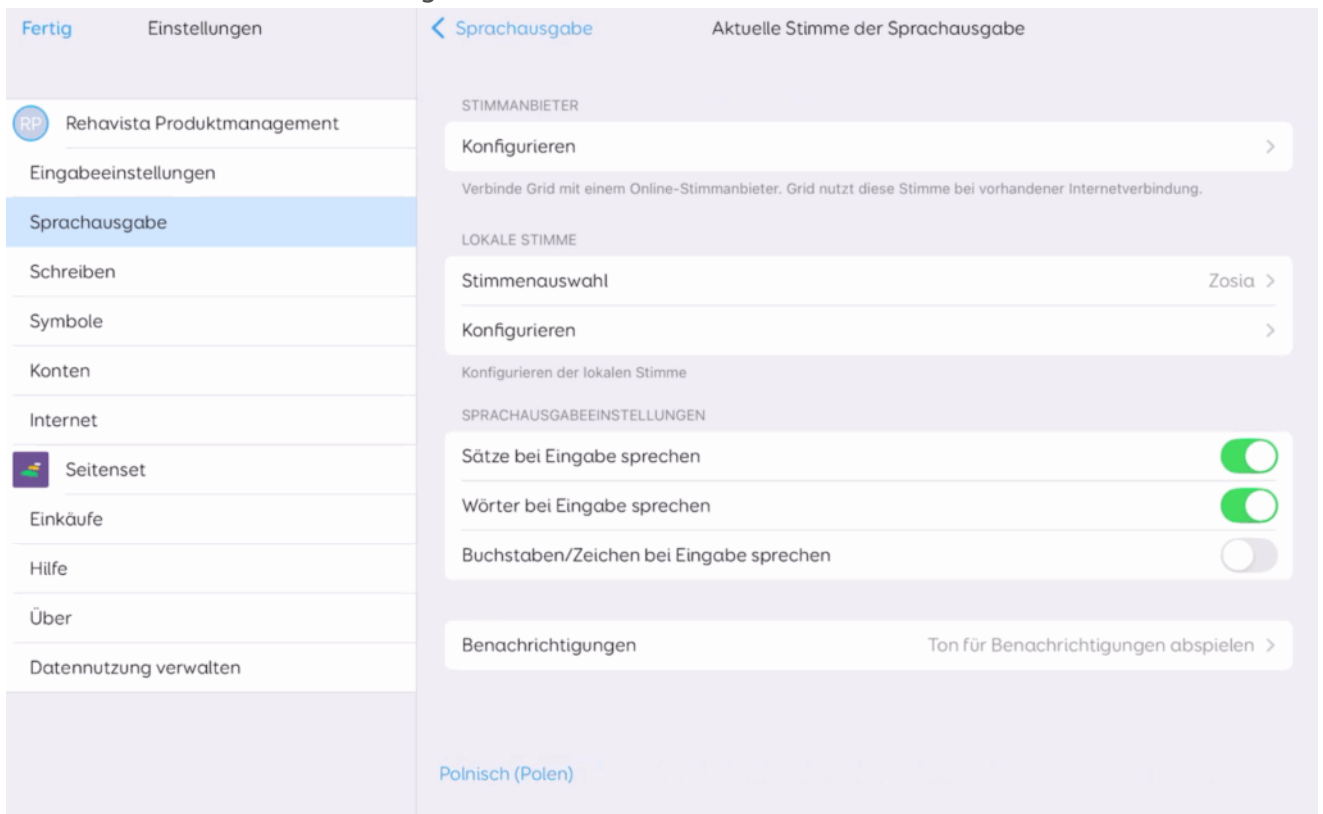

4. Tippen Sie auf den Punkt „ElevenLabs-Stimme“.

5. Tragen Sie hier ihren API Key ein.

Fertig Einstellungen

RP Rehavista Produktmanagement

Eingabeeinstellungen

Sprachausgabe

Schreiben

Symbole

Konten

Internet

Seitenset

Einkäufe

Hilfe

Über

Datennutzung verwalten

< Stimmanbieter ElevenLabs

IIElevenLabs

Um Grid mit ElevenLabs zu verbinden, müssen Sie zunächst einen API-Key aus Ihrem ElevenLabs Konto einfügen. Bestätigen Sie mit verbinden. Mehr Informationen erhalten Sie im

API Key

Verbindung trennen

Credits: 0 / 300.000

Stimme Keine Stimme ausgewählt >

Stimme testen

Online Stimme verwenden

Wenn verfügbar, verwendet Grid die Online Stimme. Bestätigen Sie diese Option, um die letzten Stimmen zu testen.