


Schnelle Kommunikation


Diese Spalte oranger Felder neben den Mitteilungspfaden lässt auf eine Reihe von Wörtern und Ausdrücken zugreifen, damit NutzerInnen schnell an einer Unterhaltung teilnehmen und zu ihr beitragen können.

Schnelle Worte

Nützliche Aussagen, die häufig verwendet werden können

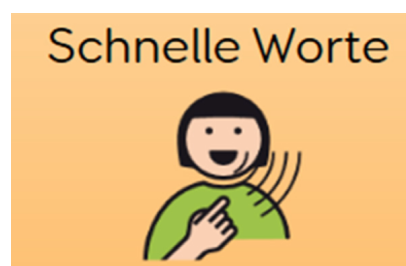

In diesem Bereich finden NutzerInnen sehr nützliche Einzelwörter, die in verschiedenen Zusammenhängen verwendet werden können, darunter Wörter wie “mehr”, “stopp” und “helfen”. Damit NutzerInnen diese nützlichen Worte vielfach und leicht einsetzen können, sind sie schnell vom Startbildschirm aus zu finden.

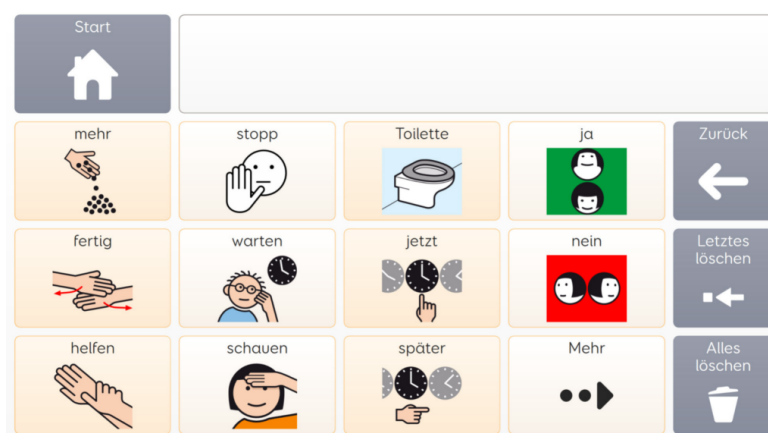

Gespräch

Unterhaltungen unterstützen



In diesem Abschnitt werden NutzerInnen zur Teilnahme an Gesprächen befähigt, indem Einzelwörter und kurze Sätze bereitgestellt werden.

In der ersten Spalte befinden sich Begrüßungen und Smalltalk – erste Fragen, die man am Anfang einer Unterhaltung stellen kann – mit der Möglichkeit die Felder der unteren Reihe für vertiefende Aussagen zu nutzen.

In der nächsten Spalte gibt es Fragen und Kommentare, die es NutzerInnen ermöglicht, ein Gespräch zu erweitern oder Interesse an den Antworten des Gesprächspartners zu zeigen.

Die dritte Spalte enthält Formulierungen, die nützlich sein können, wenn in einem Gespräch etwas schief gelaufen ist, z. B. um mehr Zeit zum Zusammenstellen einer Aussage zu erbitten oder zu sagen: „Das habe ich nicht gemeint.“

Die letzte Spalte in diesem Bereich bietet abschließende Formulierungen und Abschiede – Ausdrücke für das Gesprächsende – mit einer Option für weitere, falls erforderlich.



Meine Sätze

Schnell Aussagen teilen, die NutzerInnen wichtig sind



Die Seite bietet Raum zur Personalisierung für die NutzerInnen. Hier kann man die von NutzerInnen meistverwendeten Ausdrücke abspeichern. Einige Beispiele sind in der ersten Spalte, vorgegeben. Diese

können einfach ergänzt oder durch für die NutzerInnen relevantere ersetzt werden. Beispiele für Ausdrücke, die hinzugefügt werden können, sind regionale Ausdrücke oder Slang, die Gleichaltrige der Nutzer möglicherweise verwenden.